


Knipbaar loodvinyl:

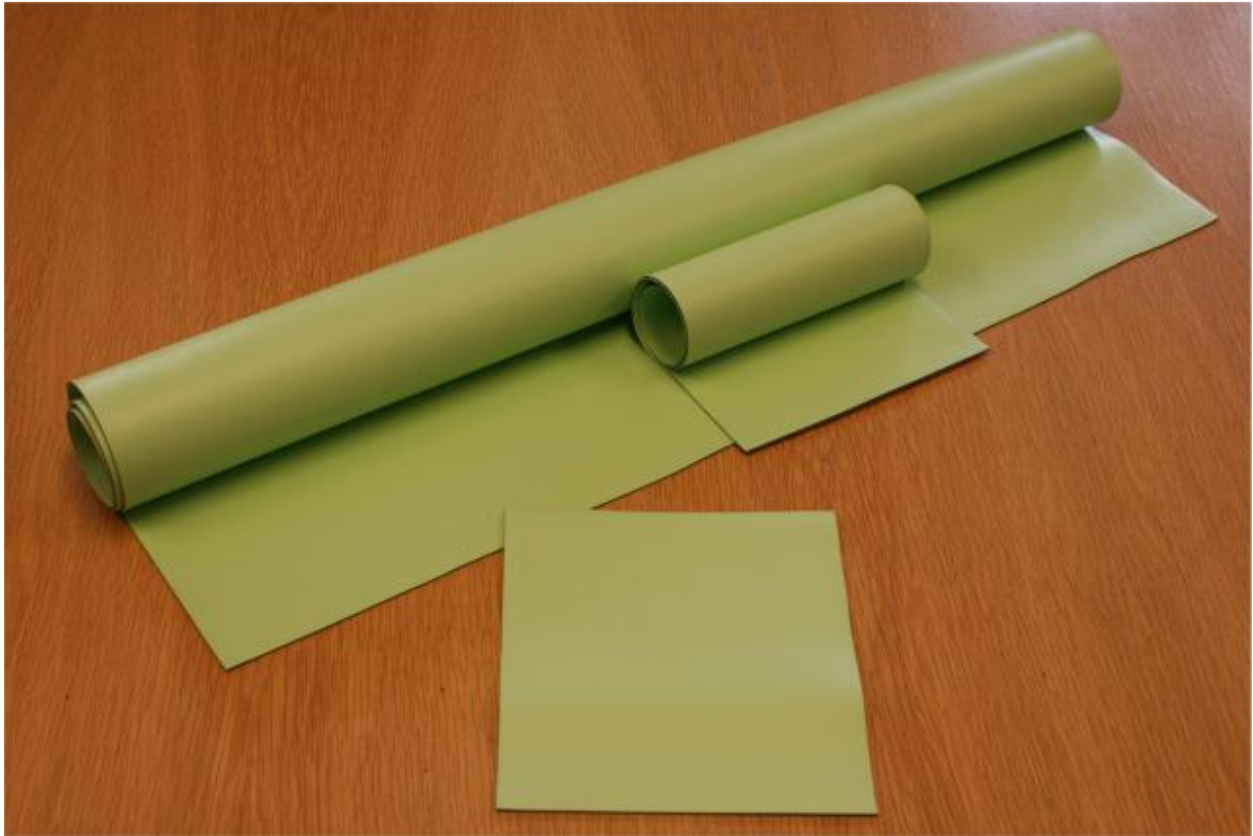

Loodvinyl is een flexibele kunststof waarin lood is verwerkt. Het kan hygiënisch worden gebruikt bij patiënten, het materiaal is afwasbaar en het lood zit opgelost in de kern. Het materiaal is met een schaar te knippen waardoor gemakkelijk speciaal gevormde afschermingen kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor de injectieplaats bij de schildwachtklier of bijvoorbeeld om benen links en rechts op de camera te kunnen scheiden. Het materiaal is leverbaar tot loodwaardes van 1 mm. Bij behoefte aan hogere afschermingen kunnen uiteraard meerdere lagen gestapeld worden gebruikt.

Loodvinyl met 1 mm Pb afscherming, lengte 0,5 meter

- breedte 50 cm
- looddikte 1 mm
- totale materiaaldikte 5 mm
- buitenzijde afgewerkt met PVC

Langere uitvoering: verlenging per 0,5 meter mogelijk